



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มโรคติดต่อทางเดินหายใจ กลุ่มโรคติดต่อทางแมลง โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๐๓ - ๕

ที่ สธ ๐๔๑๑.๔/๑๓๗๕

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดสรรชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็วใช้เลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน NS1 (Dengue Ns1 Rapid test)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ข้อมูลจากรายงาน ๕๐๖ กองระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ พบผู้ป่วยสะสม ๓๖,๘๘๙ ราย (รายงานเพิ่มขึ้น ๔,๗๕๘ ราย) อัตราป่วย ๕๕.๒๑ ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเสียชีวิตยืนยันสะสม ๓๙ ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๑๑ และคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ป่วยในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน จะมีแนวโน้มพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยกองโรคติดต่อทางแมลง มีการดำเนินมาตรการรับมือการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน (มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗) อย่างเข้มข้น ตามมาตรการ ๔ เน้น ๔ เดือน โดยมีมาตรการเน้นย้ำในการใช้ Dengue NS1 ตรวจผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไข้เลือดออกทุกราย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

กองโรคติดต่อทางแมลง จึงขอจัดสรรชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็วใช้เลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน NS1 (Dengue Ns1 Rapid test) ตามมาตรการรับมือการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน (มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗) โดยขอความอนุเคราะห์สำนักงานป้องกันควบคุมโรค กระจายชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็วฯ ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ต่อไป ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางสาวรัตนพร บุญมีป้อม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๐๓ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวมันทนา ผดุงทศ)

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทางแมลง

แผนกระจายชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็วใช้เลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน

Dengue NS1 Rapid test ประจำปี 2567

ลำดับที่	สถานที่จัดส่ง	จำนวนจัดสรร	หน่วยนับ	หมายเหตุ
1	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1	4,000	ชุด	
2	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2	1300	ชุด	
3	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3	1700	ชุด	
4	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4	2900	ชุด	
5	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5	1700	ชุด	
6	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6	2200	ชุด	
7	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7	700	ชุด	
8	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8	700	ชุด	
9	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9	4100	ชุด	
10	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10	300	ชุด	
11	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11	250	ชุด	
12	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12	900	ชุด	

คาดการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากการพยากรณ์
ในช่วงเดือน (มิถุนายน - กันยายน) ปี 2567

เขตสุขภาพ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย (คาดการณ์)				รวม
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
เขตสุขภาพที่ 1		5,067	7,502	6,113	3,710	22,393
	เชียงใหม่	1,360	2,326	2,294	1,331	7,312
	เชียงราย	846	1,448	1,342	1,024	4,660
	แม่ฮ่องสอน	2,254	2,925	1,725	840	7,744
	น่าน	142	163	152	120	577
	แพร่	71	94	85	51	301
	ลำปาง	150	240	236	164	790
	ลำพูน	164	202	184	112	662
	พะเยา	80	104	95	68	347
เขตสุขภาพที่ 2		2,108	2,477	2,101	1,755	8,441
	อุดรดิตถ์	119	146	143	124	532
	พิษณุโลก	328	384	378	364	1,453
	ตาก	947	1,173	853	593	3,565
	สุโขทัย	297	336	356	345	1,335
	เพชรบูรณ์	417	438	371	330	1,556
เขตสุขภาพที่ 3		2,718	2,997	2,716	2,295	10,725
	กำแพงเพชร	265	317	297	282	1,161
	พิจิตร	316	342	346	331	1,334
	นครสวรรค์	1,769	1,909	1,616	1,222	6,516
	อุทัยธานี	246	282	284	290	1,102
	ชัยนาท	122	147	173	170	612
เขตสุขภาพที่ 4		3,413	3,978	4,458	3,964	15,813
	อ่างทอง	322	335	290	258	1,205
	สระบุรี	301	351	389	415	1,457
	นครนายก	166	397	411	300	1,274
	ลพบุรี	301	351	389	415	1,457
	สิงห์บุรี	26	26	27	28	107
	นนทบุรี	583	618	808	751	2,761
	ปทุมธานี	1,131	1,119	941	781	3,973
	พระนครศรีอยุธยา	583	779	1,201	1,015	3,579

เขตสุขภาพที่ 5		2,138	2,441	2,664	2,675	9,918
	กาญจนบุรี	443	440	400	360	1,643
	สุพรรณบุรี	341	376	398	413	1,527
	นครปฐม	258	321	423	486	1,489
	สมุทรสาคร	134	172	206	231	743
	สมุทรสงคราม	61	69	85	84	300
	ราชบุรี	222	311	371	340	1,244
	เพชรบุรี	445	497	517	508	1,967
	ประจวบคีรีขันธ์	234	254	264	252	1,005
เขตสุขภาพที่ 6		4,548	5,371	5,584	5,083	20,585
	สมุทรปราการ	429	471	521	532	1,953
	ฉะเชิงเทรา	297	350	373	372	1,393
	ปราจีนบุรี	264	319	317	283	1,183
	สระแก้ว	239	280	285	265	1,069
	ชลบุรี	1,346	1,508	1,699	1,768	6,321
	ระยอง	1,318	1,751	1,767	1,325	6,161
	จันทบุรี	422	465	411	333	1,632
	ตราด	232	226	211	205	875
เขตสุขภาพที่ 7		1,590	1,806	1,636	1,389	6,421
	กาฬสินธุ์	257	317	302	243	1,119
	ขอนแก่น	612	713	677	625	2,626
	มหาสารคาม	346	429	423	379	1,578
	ร้อยเอ็ด	375	347	234	142	1,098
เขตสุขภาพที่ 8		1,298	1,358	1,144	1,029	4,829
	บึงกาฬ	147	104	63	54	367
	หนองบัวลำภู	83	85	84	80	332
	อุดรธานี	188	169	169	174	700
	เลย	368	426	376	349	1,519
	หนองคาย	48	73	54	27	202
	สกลนคร	100	97	51	24	271
	นครพนม	364	404	348	322	1,438

เขตสุขภาพที่ 9		4,201	6,681	8,006	3,126	22,014
	นครราชสีมา	2,921	4,250	5,687	1,492	14,350
	บุรีรัมย์	405	754	642	497	2,298
	สุรินทร์	780	1,427	1,414	932	4,553
	ชัยภูมิ	95	250	263	204	813
เขตสุขภาพที่ 10		931	1,421	1,074	559	3,986
	ศรีสะเกษ	249	450	268	198	1,164
	อุบลราชธานี	487	715	625	250	2,078
	ยโสธร	65	115	84	63	326
	อำนาจเจริญ	37	41	32	22	132
	มุกดาหาร	93	99	65	27	285
เขตสุขภาพที่ 11		1,487	1,665	1,663	1,582	6,398
	นครศรีธรรมราช	572	673	693	667	2,606
	กระบี่	194	217	197	186	794
	พังงา	125	128	117	114	483
	ภูเก็ต	165	178	178	162	683
	สุราษฎร์ธานี	217	221	230	222	891
	ระนอง	49	43	42	40	174
	ชุมพร	165	206	206	191	767
เขตสุขภาพที่ 12		2,339	2,694	2,793	2,541	10,366
	สงขลา	927	1,024	1,088	1,025	4,063
	ตรัง	282	356	366	217	1,221
	นราธิวาส	252	321	347	333	1,254
	ปัตตานี	294	348	357	356	1,354
	พัทลุง	188	197	208	189	781
	ยะลา	287	327	315	316	1,246
	สตูล	109	120	112	105	447
เขตสุขภาพที่ 13		1,622	2,620	3,533	4,242	12,016
	กรุงเทพมหานคร	1,622	2,620	3,533	4,242	12,016

แนวทางการใช้ชุดตรวจ NS1 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

การใช้ชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็วใช้เลือดออกชนิดที่ตรวจหาหาแอนติเจน NS1


1. ขั้นตอนการใช้งานชุดน้ำยาตรวจฯ สามารถศึกษาวิธีการตรวจและการแปลผลได้ตามคลิปวิดีโอใน qr code

“ควรเก็บรักษาชุดตรวจฯ ที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส”

“กรณีเก็บในตู้เย็น ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง”

2. เกณฑ์การเลือกใช้ชุดน้ำยาตรวจฯ

* ผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสเดงกี หมายถึง มีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ไข้สูงลอย ปวดศีรษะ อาจจะมีจุดเลือดออก

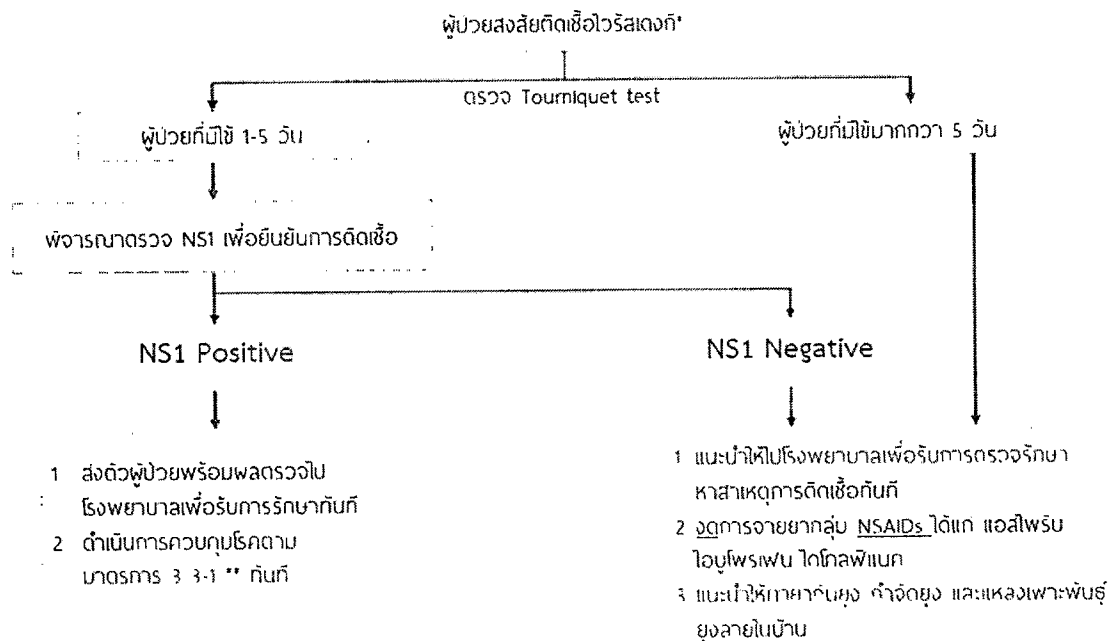

ที่ผิวหนัง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อหรือกระดูก ปวดกระบอกตา มักไม่มีอาการไอ จาม หรือมีน้ำมูก

** มาตรการ 3-3-1 หมายถึง

- 3 ชั่วโมงแรก รายงานโรคให้ รพ.สต. ทราบ (ในกรณีนี้ ถ้ารพ.สต. ตรวจพบ NS1 positive สามารถดำเนินการ ในขั้นตอนถัดไปได้ทันที)
- 3 ชั่วโมงถัดมา ให้ทีม SRRT ลงพื้นที่ สอบสวนและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ฉีดสเปรย์ในบ้านผู้ป่วย
- ภายใน 1 วัน ให้กำจัดลูกน้ำยุงลาย พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ในบ้านผู้ป่วยและสถานที่เสี่ยง (7ร.) ที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร หลังจากนั้นให้พ่นสารเคมีซ้ำในวันที่ 3 และ 7

จัดทำโดย

กลุ่มโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง


มิถุนายน 2566

**แนวทางการกระจายและติดตามผลการใช้ชุดน้ำยาตรวจไข้เลือดออก
ชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน NS1 (Dengue NS1 Rapid tests) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

กองโรคติดต่อภายในโดยแมลง ได้สนับสนุนชุดน้ำยาตรวจไข้เลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน NS1 (Dengue NS1 Rapid tests) ตามการคาดการณ์จำนวนผู้ป่วยในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้

๑. ให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ส่งใบตอบรับชุดน้ำยาตรวจไข้เลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน NS1 ฉบับจริง กลับไปยังกลุ่มโรคติดต่อภายในโดยแมลง ชั้น ๖ อาคาร ๔ กรมควบคุมโรค เลขที่ ๘๘/๒๑ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับของครบถ้วนแล้ว
๒. ให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรค กระจายชุดน้ำยาตรวจไปยังจังหวัด ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนชุดตรวจในแต่ละจังหวัดได้ ตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งรายงานการจัดสรรชุดตรวจฯ กลับไปยังกองโรคติดต่อภายในโดยแมลง ทางระบบติดตามผลการใช้ชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็ว ตรวจอย่างรวดเร็วจี๊ดเลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน (Dengue NS1 rapid test) โดยให้ สคร. รายงานในรูปแบบฟอร์มที่ ๑ ภายใน ๗ วัน หลังดำเนินการจัดสรรเรียบร้อยแล้ว
๓. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณาจัดสรรชุดน้ำยาตรวจฯ ไปยัง รพ.สต. ตามความเหมาะสม และส่งรายงานการจัดสรรชุดน้ำยาตรวจฯ กลับไปยังกองโรคติดต่อภายในโดยแมลง ทางระบบติดตามผลการใช้ชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็ว ตรวจอย่างรวดเร็วจี๊ดเลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน (Dengue NS1 rapid test) โดยให้ สสจ. รายงานในรูปแบบฟอร์มที่ ๒ ภายใน ๗ วัน หลังดำเนินการจัดสรรเรียบร้อยแล้ว
๔. ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล รายงานผลการใช้ชุดน้ำยาตรวจฯ กลับมาที่กองโรคติดต่อภายในโดยแมลง ทางระบบติดตามผลการใช้ชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็ว ตรวจอย่างรวดเร็วจี๊ดเลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน (Dengue NS1 rapid test) โดยให้ รพ.สต. รายงานในรูปแบบฟอร์มที่ ๓ ภายใน ๗ วัน หลังใช้ชุดตรวจ
๕. ช่องทางการส่งรายงานตามแบบฟอร์มที่ ๑, ๒ และ ๓ ทางระบบติดตามผลการใช้ชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็ว ตรวจอย่างรวดเร็วจี๊ดเลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน (Dengue NS1 rapid test) ตามลิงก์
<https://sites.google.com/view/denguens1>
หรือ QR code ด้านล่าง

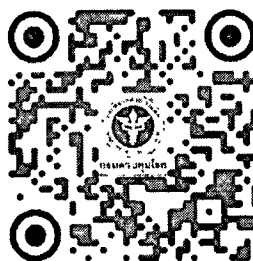

ใบตอบรับชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็วใช้เลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน NS1
(Dengue NS1 rapid test) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อ-สกุล.....ตำแหน่ง.....

กลุ่มงาน.....สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่.....

โทรศัพท์.....

ได้รับชุดน้ำยาตรวจฯ จำนวน.....ชุด (๑ กล่อง มี ๒๕ ชุด)

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับของ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

หมายเหตุ

ขอความกรุณาส่งใบตอบรับฉบับจริงกลับไปยังกลุ่มโรคติดต่อนำโดยยุงลาย กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
กรมควบคุมโรค อาคาร ๔ ชั้น ๖ เลขที่ ๘๘/๒๑ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ. นนทบุรี ๑๑๐๐๐
ภายใน ๗ วัน หลังจากวันที่ได้รับของไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

แบบฟอร์มที่ ๑

สำหรับ สคร

รายงานการจัดสรรชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็วใช้เลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน NS1
(Dengue NS1 Rapid tests) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่.....
๒. ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
๓. ตำแหน่ง
๔. วันที่ได้รับชุดน้ำยาตรวจ NS1 (Dengue NS1 rapid test).....
๕. จำนวนที่ได้รับ ชุด (๑ กล่อง มี ๒๕ test)
๕. แผนการกระจายในพื้นที่ ระบุรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อจังหวัด	จำนวนที่จัดสรร (ชุด)

หมายเหตุ

กรุณาส่งรายงานตามแบบฟอร์มที่ ๑ ภายใน ๗ วัน หลังดำเนินการจัดสรรเรียบร้อยแล้ว

สำหรับ สสจ.

แบบฟอร์มที่ ๒

รายงานการจัดสรรชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็วใช้เลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน NS1
(Dengue NS1Rapid tests) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่.....
๒. ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
๓. ตำแหน่ง
๔. วันที่ได้รับชุดน้ำยาตรวจหา NS1 (Dengue NS1 Rapid tests).....
๕. จำนวนที่ได้รับ ชุด (๑ กล่อง มี ๒๕ test)
๖. แผนการกระจายในพื้นที่ ระบุรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่ออำเภอ	รายชื่อรพ.สต.	จำนวนที่จัดสรร (ชุด)

หมายเหตุ กรุณาส่งรายงานตามแบบฟอร์มที่ ๒ ภายใน ๗ วัน หลังดำเนินการจัดสรรเรียบร้อยแล้ว

แบบฟอร์มที่ ๓

รายงานผลการใช้ชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็วใช้เลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน NS1 (Dengue NS1 Rapid test)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

๒. ผลการใช้ชุดตรวจฯ ระบุรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อหน่วยบริการ	วันเดือนปีที่ใช้	ข้อมูลผู้ป่วย					จำนวนชุดตรวจที่ใช้ต่อ ๑ ราย (ชุด)	ผลการตรวจ Tourniquet Test	ผลการตรวจ NS๑	การดำเนินการหลังทราบผลตรวจ (สามารถเลือกได้หลายข้อ)					วันเดือนปีที่ดำเนินการควบคุมโรค		การติดตามสถานะผู้ป่วย	การวินิจฉัยสุดท้าย	ผู้รายงาน	เบอร์โทร
			HN รพ.สต.	เพศ	อายุ	อาชีพ	วันเดือนปีที่เริ่มป่วย				ส่งตัวผู้ป่วยไปรพ.	แนะนำให้ไปรพ.เพื่อรับการตรวจหาสาเหตุอื่น	งดจ่ายยา กลุ่ม NSAIDs	แนะนำให้ทายากันยุงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	ดำเนินการมาตรการ ๓-๓-๑	วันเดือนปีที่ลงพื้นที่สอบสวนโรค	วันเดือนปีที่พ้นสารเคมี				

หมายเหตุ กรุณาส่งรายงานตามแบบฟอร์มที่ ๓ ภายใน ๗ วัน หลังใช้ชุดตรวจฯ ต่อ ๑ case

เอกสารคำแนะนำ

วิธีการใช้ชุดตรวจใช้เลือดออกชนิดตรวจหาแอนติเจน NS1
แบบรวดเร็ว

การเก็บรักษา

- แนะนำให้เก็บชุดตรวจไว้ที่อุณหภูมิห้อง ที่อุณหภูมิอยู่ในช่วง 2- 40 °C และเป็นที่แห้งสะอาด ไม่โดนแสงแดดส่องตรง เช่น ในตู้เก็บยา
- ในกรณีที่เก็บในตู้เย็นที่เป็นช่องแช่เย็นปกติ ห้ามเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง ก่อนใช้ให้นำออกมาไว้ที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อย 30 นาที
- ในกรณีสถานที่จัดเก็บอุณหภูมิสูงเกิน 40 °C ให้เก็บในที่เย็น เช่น กล่องเก็บความเย็น ที่มีเจลเก็บความเย็นอย่างน้อย 2 ก้อน โดยต้องนำเจลไปแช่ในตู้เย็นช่องแช่แข็งก่อนใช้งาน และต้องสลับเปลี่ยนเจลนำไปแช่เย็น เพื่อควบคุมอุณหภูมิในกล่องให้ไม่เกิน 40 °C


หลักการใช้ชุดตรวจสำเร็จ/ชุดตรวจแบบรวดเร็ว (RDT)

1. ตรวจสอบชุดตรวจ ว่าเป็นชุดตรวจ Standard Q Dengue NS1 Ag วันหมดอายุ จำนวน และชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนตรงกับที่ระบุในเอกสาร
2. อ่านเอกสารกำกับที่มากับชุดตรวจ ได้แก่ วิธีการใช้ การแปลผล การเก็บชุดตรวจ อย่างละเอียดทุกครั้ง เมื่อมีการเปิดใช้งานชุดตรวจกล่องใหม่แม้ว่าเป็นชุดตรวจชนิดเดิม
3. ดำเนินการตรวจ ตามเอกสารกำกับทุกขั้นตอน อย่างเคร่งครัด
4. อ่านผลการตรวจ ตามเอกสารกำกับ และอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ระบุในเอกสาร

เฉพาะชุดตรวจ Standard Q Dengue NS1 Ag ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้


1

ตรวจสอบวันหมดอายุ จากนั้นฉีกซองชุดตรวจและตรวจสอบสารดูดความชื้น

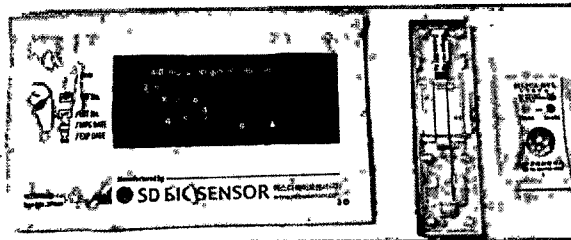


2

ดูดตัวอย่างตรวจที่เป็นเลือดครบส่วน หรือซีรัม หรือพลาสมา ให้ปริมาตรถึงขีดสีดำของหลอดดูดตัวอย่าง (ปริมาตร 100 ไมโครลิตร) ที่จัดเตรียมไว้ในกล่องชุดตรวจ

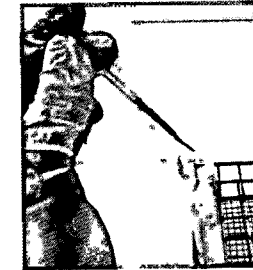

ตัวอย่างตรวจที่เป็นเลือดครบส่วน


หรือ

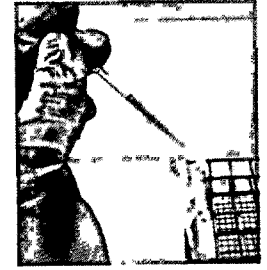

ตัวอย่างตรวจที่เป็นซีรัมหรือพลาสมา



3

หยอดตัวอย่างลงในหลุมตัวอย่าง

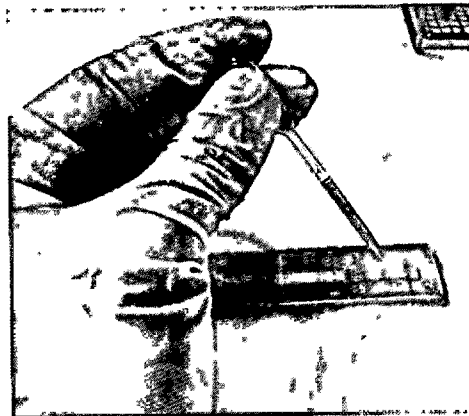


4

รออ่านผล 15 นาที แต่ไม่เกิน 20 นาที

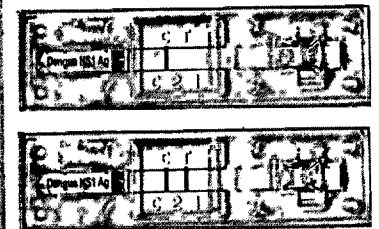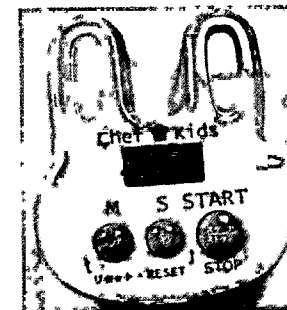

การอ่านและการแปลผลตรวจ ชุดตรวจ Standard Q Dengue NS1 Ag



Negative

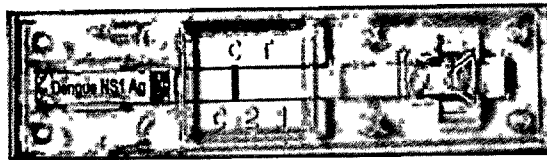


ผลลบ

ปรากฏแถบสีที่ตำแหน่ง "C" 1 ขีด เท่านั้น

อ่านผลไม่ได้ (Invalid) หรือมีความผิดปกติ คือ
ไม่มีแถบสีที่ตำแหน่ง "C" แม้ว่าจะมีแถบสีขึ้นที่ตำแหน่งอื่นก็ตาม

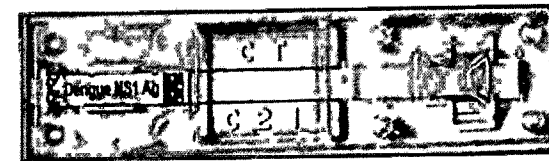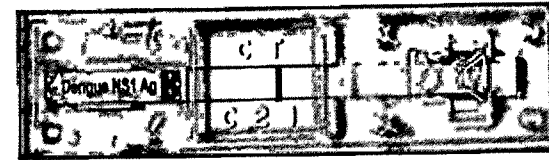

Positive

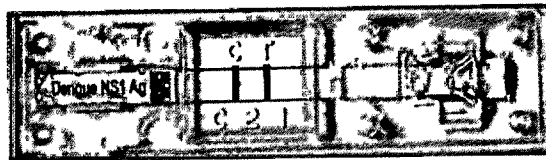

ผลบวก

ปรากฏแถบสี 2 ขีด ตามตำแหน่ง

1. ที่ตำแหน่ง "C" 1 ขีด
2. ที่ตำแหน่ง "T" 1 ขีด



ขั้นตอนการใช้งาน NS1

ขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
ใช้เลือดออกแบบรวดเร็ว
(Dengue NS1 rapid test)



ระบบติดตามผลการใช้ชุดตรวจ
ใช้เลือดออกแบบรวดเร็ว
(Dengue NS1 rapid test)